

16

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL AUDÍFONO

Si alguien se traga una pila, llame enseguida a la Sección de Urgencias del hospital más cercano.

PARA TODOS LOS AUDÍFONOS

Lea atentamente el manual de instrucciones, la garantía, y la póliza de seguros que acompañan a sus audífonos. La garantía es el acuerdo básico con el fabricante, y deberá ser respetado por su audioprotesista. No dude en preguntar sobre cualquier tema a este respecto.

Guarde todos los documentos relacionados con la compra de su audífono, para lo que pudiera ocurrir.

Recuerde:

Como con cualquier otro instrumento médico, es importante que observe las siguientes normas:

1. No deje su audífono o sus pilas al alcance de niños pequeños, animales domésticos u otras personas que no entiendan cómo cuidar y usar estos aparatos.

Los perros sobre todo se sienten atraídos por el olor a oídos que se desprende de los audífonos, y pueden masticarlo.

2. Guarde siempre su audífono en el mismo sitio cuando no lo use. Cuanto más pequeño sea, más fácil es perderlo.

- Colóquelo en una caja (la misma en la que venía), y en un sitio donde niños, animales y accidentes no lo dañen.

3. Debe usar su audífono sólo como se lo ha indicado su audioprotesista.

4. Un audífono puede dejar de funcionar (por ejemplo, cuando se gasta la pila). Tendrá que ser consciente de ello, y llevar pilas de repuesto, sobre todo si su audífono le ayuda a evitar peligros.

5. Si por casualidad alguien se traga una pila (o incluso un audífono, por su tamaño reducido), llame a la Sección de Urgencias del hospital más cercano.

Todos los audífonos tienen 5 enemigos principales:


- La humedad.
- El polvo y la suciedad.
- Las temperaturas extremas.
- El cerumen.
- La manipulación indebida.

La humedad: proteja su audífono de la humedad.

- Una causa frecuente de la humedad es el calor corporal y el sudor. Los ácidos corporales junto con el sudor pueden deteriorar los componentes electrónicos de su audífono. Si tiene problemas con una sudoración excesiva, puede adquirir un deshumidificador. Coloque su audífono en el deshumidificador durante la noche, y su audífono estará seco a la mañana siguiente. Otra posibilidad sería quitarse el audífono en las situaciones que provoquen sudor. No obstante, no deje de usar su audífono por causa del sudor: consulte a su audioprotesista acerca del uso específico de su audífono.



- No intente nunca limpiar su audífono con un líquido. Evite sobre todo el alcohol y los disolventes. No inyecte nada en el audífono.

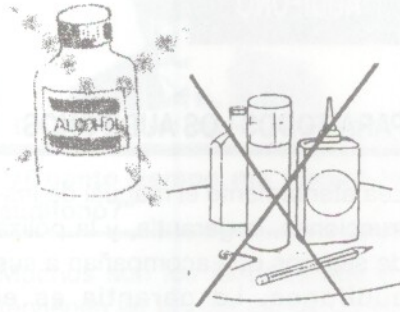

- No exponga su audífono al vapor, incluyendo duchas, saunas, o lluvia.
- No se ponga nunca laca para el cabello ni otros sprays, cuando lleve puesto el audífono. Quíteselo antes de mojarse el pelo, y déjelo secar antes de volver a ponerse el audífono.



— Muchas sustancias químicas de cosméticos, perfumes, fertilizantes para el jardín, pinturas, lociones aftershave, lociones anti-mosquitos, pueden dañar su audífono y sus componentes internos. Quítese siempre el audífono antes de usar dichos productos, y deje que se sequen antes de volver a colocarse el audífono.

Si su audífono se moja:

— *Sudor:*

* compre un deshumidificador en su gabinete audioprotésico u óptica.

* compre gel de sílice y lea las instrucciones atentamente, ya que requiere un tratamiento determinado, y le indicará cuándo reemplazarlo.

— *Agua:*

Agua clara (ducha, lluvia, lavado, piscina, donde se moje completamente): el audífono puede sobrevivir si hace lo siguiente:


1. Separe el molde del audífono (excepto en intra-concha e intra-canal).
2. Quite la pila y deje abierto el portapilas, secando el agua con un pañuelo de papel, agitando *levemente* el audífono. No use el audífono durante 24 horas.

3. Si tiene un deshumidificador, coloque en él su audífono durante unos días. No ponga su audífono en una bolsa de plástico ya que conservará la humedad por más tiempo. Si coloca el audífono frente a un aparato de aire acondicionado, también podrá evaporarse la humedad.

4. Al cabo de unos días, cuando esté seco el audífono, póngale una pila, y pruébelo.

5. Si no funciona, llévalo a su audioprotésista.

Agua salada: lleve el audífono a su audioprotésista cuanto antes: la sal destruye los componentes.

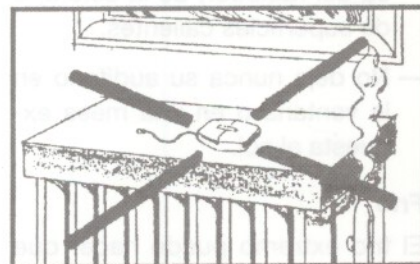

ATENCIÓN:

No intente NUNCA secar un audífono mojado en el horno, con un secador de pelo, o en un micro-ondas. Esto le producirá daños graves.